



UniForm – unikátní technologie pro redukci celulitidy

Nejnovější technologie pro neinvazivní léčbu celulitidy – kombinace Alma Lasers unipolární technologie a aplikátoru pro mechanickou lymfatickou drenáž

Hlavice UniForm kombinuje patentovanou unipolární radiofrekvenční technologii s aplikátorem pro mechanickou lymfatickou drenáž a poskytuje tak technologicky nejrozvinutější systém pro léčbu celulitidy. Klinickým testováním bylo prokázáno, že hlavice UniForm slouží k efektivní redukci celulitidy, tvarování těla a zeštíhlení stehen.

Neinvazivní technologie

Nová hlavice UniForm poskytuje neinvazivní léčbu celulitidy. V jediné hlavici jsou obsaženy dvě modality: mechanický aplikátor a patentovaný RF UniLarge aplikátor. Na rozdíl od ostatních technologií dodává RF hlavice díky vysokému výkonu 300 Wattů terapeutické teplo hluboko do pokožky a podkoží. Mechanický aplikátor zlepšuje cirkulaci a lymfatickou drenáž z podkoží, což vede k výborným výsledkům v oblasti tvarování těla, vypnutí pokožky a zeštíhlení stehen.

Kombinace mechanické a radiofrekvenční energie pro léčbu celulitidy

- Smršťuje kolagenní vlákna; zpevňuje pokožku
- Hlubkové zahřívání zasahuje lipidy; smršťuje se pojivová tkáň
- Zlepšuje krevní a lymfatické proudění
- Zlepšuje strukturu pokožky, pokožka je vypnutá a vyhlazená


Jednoduché, pohodlné ošetření

Běžné ošetření hlavicí UniForm představuje šest až osm sezení, každé sezení trvá 20 až 40 minut, s možností následných „udržovacích“ sezení každých 6 měsíců.


Snadná obsluha

- Parametry ošetření jsou přeprogramovány
- Dotekový LCD display


Působení ve tkáni

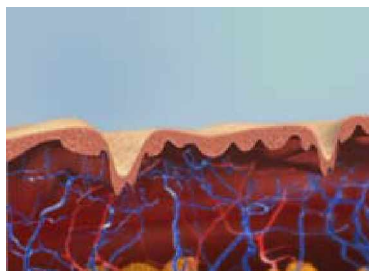

Před: Pokožka je povolená, oteklá, s nevzhlednými dolíčky

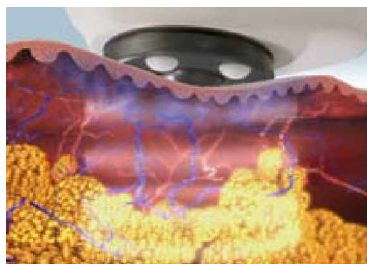

V průběhu ošetření: Synergický efekt mechanické lymfatické drenáže s radiofrekvencí přesouvají zkapalněný tuk z kůže a podkoží přes lymfatický systém, dochází k vypnutí kolagenních vláken a k novotvorbě kolagenu.

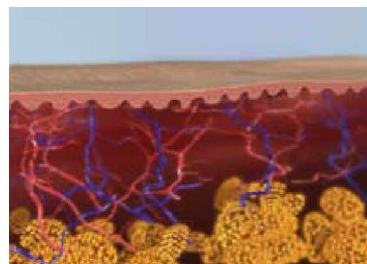

Po: Pokožka vypadá hladší a vypnutější

Komfort při ošetření díky technologii IN-Motion™

Technologie IN-Motion™ od společnosti Alma Lasers zajišťuje, že je ošetření jednoduché, rychlé a pohodlné. Technologie IN-Motion™ umožňuje postupné zvýšení terapeutické teploty, aniž by vzniklo riziko poranění pacienta, ošetření je pro pacienta díky této technologii bezbolestné. Aby bylo dosaženo optimálních výsledků při léčbě celulitidy, pacienti by měli dodržovat vyváženou stravu, pitný režim a pravidelně cvičit.

Technická specifikace - Hlavice UniForm

Zdroj energie	RF energie
Frekvence	40,68 MHz
Výkon	až 300 W
RF Unilarge hrot	
Materiál	aluminium
Povrch	potaženo kysličníkem hlinitým
Průměr kontaktní plochy	19 mm
Rotační část	
Rychlost rotace	150 otáček za minutu
Průměr kola	50 mm
Průměr masážních kuliček	10 mm

Technická specifikace - systém

Elektrické parametry	230 VAC, 50 Hz
Výkon	až 300 W
Rozměry systému	54 cm (š) x 44 cm (h) x 97 cm (v)
Váha	50 kg

Obrázky před a po

